


Mobilmat

Notice d'utilisation



Réglage en hauteur de la table à langer

1. Vérifier qu'aucun objet ne viendra gêner la montée et la descente de la table
2. Vérifier que la télécommande est déverrouillée comme sur la photo à droite, si ce n'est pas le cas reportez-vous à la section suivante

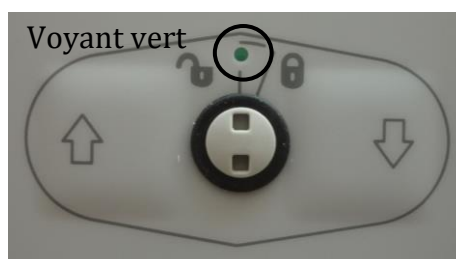

3. Appuyer soit sur le bouton de gauche (flèche vers le haut) pour monter le plan de change soit sur le bouton de droite pour le descendre.

Une fois le plan de change à hauteur, nous vous recommandons de verrouiller la télécommande (voir section suivante).




Verrouillage et déverrouillage de la télécommande

Verrouillage de la télécommande

Télécommande déverrouillée



Insérer la clé puis tourner vers la droite

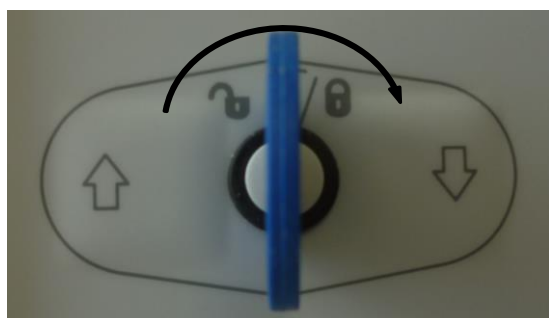

Une fois verrouillée, vous avez un voyant jaune entre les deux cadenas




Déverrouillage de la télécommande

Télécommande verrouillée



Insérer la clé puis tourner vers la gauche

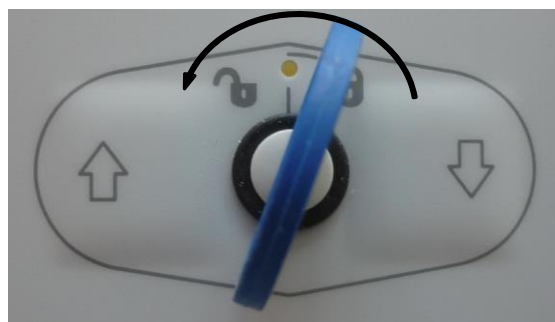

Une fois déverrouillée, vous avez un voyant vert entre les deux cadenas



Capacité de charge



La capacité de charge maximale de la table à langer est de 40 kg.

Toute charge supérieure peut entraîner une dégradation du matériel qui ne pourra être pris en charge par la garantie.

Conseils de sécurité



Ne pas régler la hauteur de la table à langer en présence d'un enfant sur le tapis ou dans la baignoire.

Ne rien positionner sous la table lors du réglage en hauteur

Verrouiller la télécommande après réglage afin d'éviter la manipulation par une tierce personne

Recherche de panne

Mécanisme de levée :

La table de change ne peut pas être réglée en hauteur :

Première partie : Contrôles sans démontage

- Vérifier que la prise électrique est bien branchée
- Vérifier que la télécommande est en position déverrouillée

Seconde partie : Contrôles nécessitant un démontage

- Retirer les deux carters situés autour du piètement
- Désolidariser du piètement la pièce en forme de U reliant le mur aux rails, puis tirer le meuble vers vous
- Vous avez alors accès au boîtier de contrôle et au vérin

Symptôme	Cause possible	Action
Le voyant d'alimentation du boîtier de contrôle n'est pas allumé	Câble d'alimentation défectueux	Remplacer le câble
Le voyant d'alimentation est allumé, le vérin ne bouge pas	Vérin déconnecté du boîtier de contrôle	Replacer correctement la prise du vérin dans le boîtier de contrôle
Pas de bruit de relais (« clic ») lors de l'appui sur les touches de la télécommande	Télécommande déconnectée du boîtier de contrôle	Repositionner la prise de la télécommande sur le boîtier de contrôle
	Télécommande défectueuse	Remplacer la télécommande
Le vérin monte mais ne descend pas ou le vérin descend mais ne monte pas	Télécommande défectueuse Boîtier de contrôle défectueux	Contacteur Loxos

Troubleshooting Electronics

Symptom	Possible cause	Action
Power indicator does not light up	- Not connected to mains	- Connect to mains
	- The fuse has blown	- Replace fuse, if the system is prepared for external fuse replacement, or send the system for repair
	- Defective power cable	- On control boxes with exchangeable power cable change the cable. - On control boxes with fixed cable send it for repair
	- Control box defective	- Send control box for repair
Power indicator lights up, but actuator does not run	- Actuator plug not pushed into control box properly	- Push actuator plug into control box properly
Relays in control box are heard clicking	- Actuator defective	- Replace actuator - Control box defective - Replace the control box
Power indicator lights up, but actuator does not run	- Control box defective	- Send control box for repair
No relay noise is heard from control box Not valid for CB20/CB6S OBF/CB16 OBF	- Handset defective	- Send handset for repair
Control box completely dead on battery and no relay clicking is heard	- Battery completely flat	- Charge battery
	- Battery defective	- Replace battery
Actuator does not run on battery, but relay clicking is heard	- Actuator plug not properly pushed into control box	- Push actuator plug properly into control box
	- Actuator defective	- Replace actuator
	- Control box defective	- Replace control box
Control box okay apart from one direction on one channel	- Handset defective	- Send handset for repair
	- Control box defective	- Send control box for repair